

JAS 高速炼厂气分析仪

JAS 高速 RGA

jas Analyzer

JAS 高速炼厂气分析仪

JAS高速RGA，可在5分钟内完成炼厂气组成分析。除了烃类和永久性气体外（C，-CO⁺，H₂，O₂，N₂，CO，CO₂），如果还分析硫化氢（H₂S）另外加2分钟。

该系统符合 ASTM D1946, D2163, EN15984, DIN 51666 和 UOP 539 方法要求。

升级选项

液化石油气（LPG）的分析




- 可选择安装液体进样阀（LSV）
- 3分钟内完成所有相关分析液态、气态物流

微量一氧化碳，二氧化碳

- JAS 甲烷化炉
- 可以检测 0.1ppm 的 CO 和 CO₂

特点和优势

- 交钥匙解决方案——保证应用方案性能
- 分析时间小于 5分钟（如果包括H₂S小于7分钟）
- 可选液化石油气和微量CO、CO₂分析升级
- 将多个分析系统集成在一套系统中，节省了空间
- 维护简单（坚固耐用的微填充色谱柱和钝化的管线）
- BTU软件完全内嵌于化学工作站软件中自动计算样品的气体性质并打印
- JAS 可以给用户提供灵活、全面的气体进样系统（GICU）

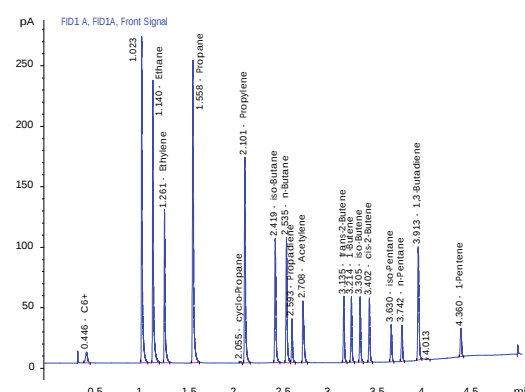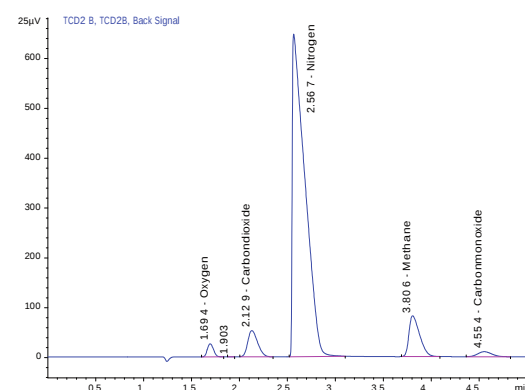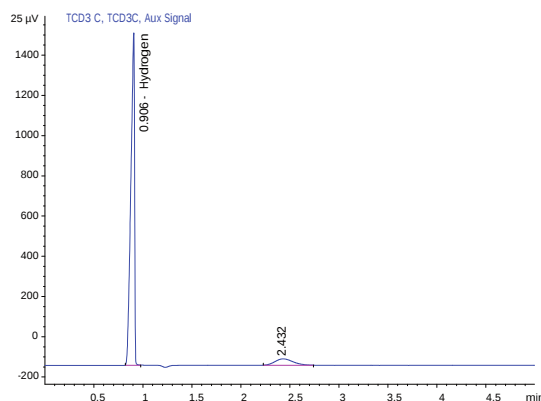

JAS 高速炼厂气分析仪

JAS 高速 RGA

选项 JAS GICU

JAS 气体进样控制单元

- 可以处理不同压力的样品
- 自动可从不同气体容器进样
- 进样压力可控（从150到1800毫），再现性好，标准偏差小
- 多浓度校正
- 多样品环吹扫
- 进样时间可程序设定，以样品环体积为基础
- 可匹配各种色谱仪



应用范围

- 炼油厂
- 石化厂
- 催化剂厂
- 研发实验室

JAS 高速炼厂气分析仪解决方案

- 安捷伦 7890 气相色谱仪，配有
- 2 x TCD, 1 x FID
- JAS阀解决方案
- 配有微填充色谱柱和毛细管色谱柱，整个管路钝化
- JAS BTU-软件



详情请见

德国联合分析系统有限公司北京代表处
joint analytical systems GmbH

北京市朝阳区裕民路12号
元辰鑫大厦E1座1019室
100029

电话: 010-82250308
传真: 010-82251172
电子邮件: sales@jas-china.com
网站: www.jas-china.com

版权所有 © 2014
joint analytical systems GmbH
保留所有权利