

JAS 嗅觉仪

从混合气味中鉴定单一气味的嗅觉仪

jas Olfactometer



简便快捷的解决方案

JAS嗅觉仪

操作模式

JAS为食品和风味剂加工业提供的产品系列中有一个从混合气味中鉴别单一气味的嗅觉仪

从色谱柱里洗脱的化合物被分流成两部分，一部分被引导到气相色谱检测器中，另一部分被引导到鼻子模块。

JAS 的嗅觉仪可让操作者使用自己的鼻子来确定从色谱柱里分离出来的单一气味。如右图所示，独特的推/滑块组合可以灵活的标记色谱峰的出现或对它们的强度和持续时间进行标记。

JAS 的嗅觉仪完全兼容安捷伦 7890 或 6890 GC 和其操作软件如气相色谱化学工作站、质谱化学工作站和 EZ Chrom软件。

可加热的和灵活的传输线用来防止化合物冷凝，让用户把鼻子模块调节到最舒适的位置。附带的加湿器可避免鼻子过于干燥。





JAS 嗅觉仪：

- 预装在 GC 侧板上，
- 与安捷伦 6890&7890 GC 完全兼容，
- 兼容安捷伦 GC 和 MSD 化学工作站
- 提供一个舒适的操作位置，鼻子模块高度可自由调节



嗅觉仪在GC或MSD化学工作站或 EZChrom色谱图中标记的色谱峰,强度和持续时间

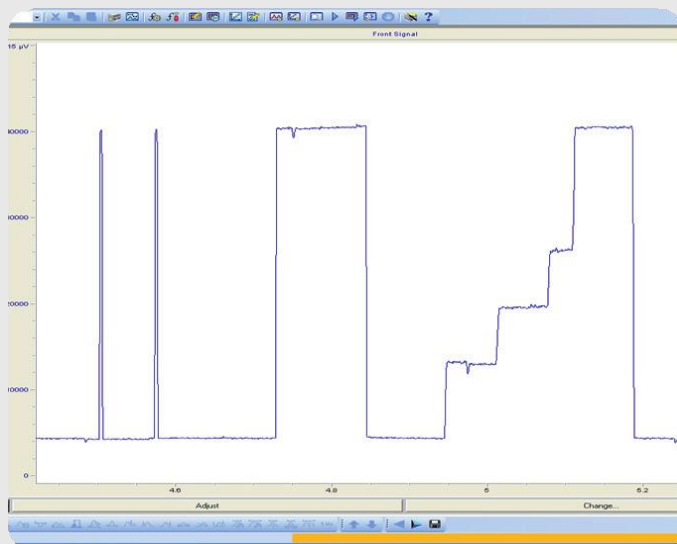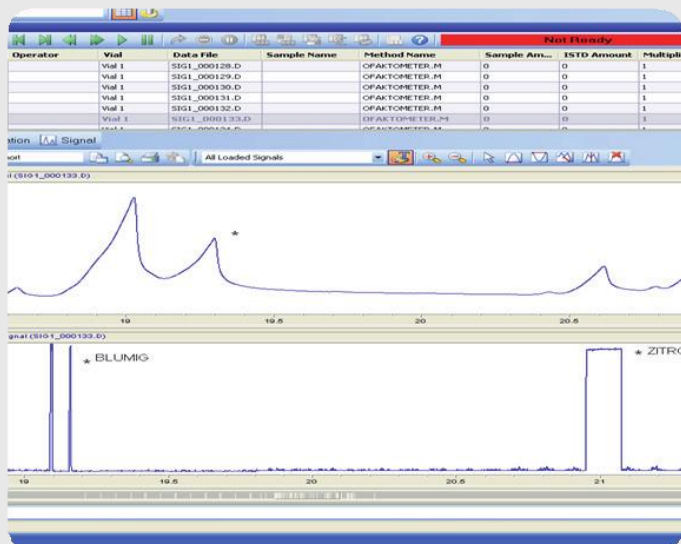

JAS 嗅觉仪

性能及优点

性能及优点

- 可调节的传输线让使用者可自行调节高度
- 可加热的传输路径，以防止化合物冷凝
- 符合人机工程学优化的鼻子模块可防止在模块内部或外部的冷凝
- 推/滑块组合可以灵活的记录峰的出现或它们的强度和持续时间
- 可以嵌入到气相色谱化学工作站、质谱化学工作站和EzChrom软件中
- 可选的 EPC模块, 改变流速和鼻子模块的湿度
- 包括加湿器





关于 JAS

自1995年以来JAS是安捷伦科技的一个重要合作伙伴和技术增值供应商。我们是一个勇于创新的组织,为GC, GCxGC, μ GC, GC-AED, GC-MSD, GC-QQQ, LC, LC - MS 或 LC - QQQ 和Q - TOF 的 LC - MS 应用, 提供定制解决方案。

JAS 服务的重点行业

- 化学
- 环境
- 食品工业
- 法医
- 机械工程
- 炼油、石化、天然气
- 制药

JAS 应用于气相色谱的产品

- 原子发射光谱检测器 (AED)
- 冷阱系统 (CryoTrap)
- 定制阀系统 (VALVE Systems)
- 制备馏分收集器 (EzPrep)
- 嗅觉检测器 (Olfactometer)
- 斯科蒂 (Scotti-RFID)
- 全能进样口 (UNIS)

德国联合分析系统有限公司北京代表处
Joint Analytical Systems GmbH

北京市朝阳区裕民路12号
元辰鑫大厦E1座1019室
100029

电话: 010-82250308
传真: 010-82251172
电子邮件: sales@jas-china.com
网站: www.jas-china.com

版权所有© 2014

joint analytical systems GmbH

保留所有权利